


Tekniset tiedot

OTICON | **Opn**

IIC 85

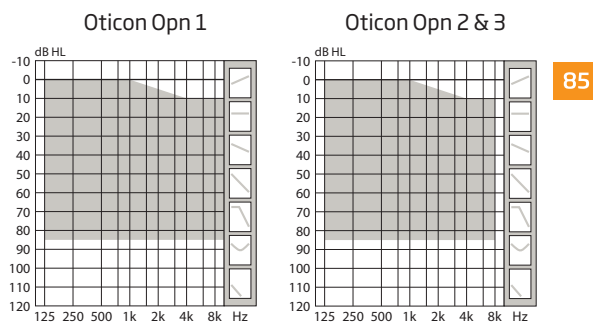

	Oticon Opn 1	Oticon Opn 2	Oticon Opn 3
Puheen ymmärtäminen			
OpenSound Navigator™	Taso 1	Taso 2	Taso 3
- Max. melunpoisto	9 dB	5 dB	3 dB
Speech Guard™ LX	Taso 1	Taso 2	Taso 3
Soft Speech Booster LX	•	•	•
Speech Rescue™ LX	•	•	•
Äänenlaatu			
Clear Dynamics	•	•	-
Sovitusalue*	10 KHz	8 KHz	8 KHz
Äänenprosessointikanavat	64	48	48
Kuuntelumuukavuus			
Transient-melunhallinta	4 säätövaihtoehtoa	Virtakytkin	Virtakytkin
Feedback shield LX	•	•	•
Yksilöinti & Sovituksen hallinta			
YouMatic™ LX	3 säätövaihtoehtoa	2 säätövaihtoehtoa	1 säätövaihtoehtoa
Sovituskaistat	16	14	12
Sopeutumishallinta	•	•	•
Oticon Firmware Updater	•	•	•
Sovitusmenetelmät	VAC+, NAL-NL1+2, DSL v5.0	VAC+, NAL-NL1+2, DSL v5.0	VAC+, NAL-NL1+2, DSL v5.0
Akustiset merkkiäänet	•	•	•
Pariston kesto, tuntia**	60-70	60-70	60-70

OpenSound Navigator™ analysoi jatkuvasti ympäristöä ja lieventää häiritsevää melua.

Oticon Opn on rakennettu Velox™ -alustalle, jonka taajuuserottelukyky toimii 64 kanavalla (Opn 1).

Täyden ohjelmitavuuden ja päivitettävän ohjelmiston ansiosta Velox-alusta on valmis tulevaisuuteen.



IP68

* Kaistanleveys saatavilla sovituksen aikana tehtäviin säätöihin.


** Paristokoko 10 - IEC PR70.

Todellinen pariston kesto esitetään arviovalinän perustuen eri käyttökohteisiin eri vahvistusasetuksilla ja ottotasoilla.

- Oletus
- Ei sisälly

Tekniset tiedot Mitattu		Keinokorva IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV ja IEC 60318-4:2010			2CC-kytkinontelo ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 ja IEC 60318-5:2006		
Oticon Opn IIC 85		Opn 1	Opn 2	Opn 3	Opn 1	Opn 2	Opn 3
Taajuusalue Hz		100-9500	100-7500	100-7500	100-9200	100-7500	100-7500
OSPL90	Huippu	126 dB SPL			116 dB SPL		
	1600 Hz	123 dB SPL			114 dB SPL		
	HFA-OSPL90	121 dB SPL			113 dB SPL		
Suurin vahvistus*	Huippu	58 dB			47 dB		
	1600 Hz	54 dB			45 dB		
	HFA-FOG	54 dB			46 dB		
Viitevahvistus		47 dB			37 dB		
Induktiokelan antotaso (1600 Hz)	1 mA/m kenttä	-			-		
	10 mA/m kenttä	-			-		
	SPLITS L/R	-			-		
Totaalinen harmoninen särö (Ottoääni 70 dB SPL)	500 Hz	2 %			< 2 %		
	800 Hz	3 %			2 %		
	1600 Hz	2 %			< 2 %		
Ekvivalentti ottokohinataso		Omni 18 dB SPL			18 dB SPL		
Pariston kulutus**	Tyypillinen	1.1 mA			1.4 mA		
	Lepovirta	1.0 mA			1.0 mA		
Pariston kesto, laskettu, tuntia***		90			70		
IRIL (IEC 60118-13:2016)		700/1400/2000 MHz: 19/11/10 dB SPL					

- * Mitattu ottotasolla 70 dB SPL, kun kuulokojeen vahvistus on suurin mahdollinen ja siitä on vähennetty 20 dB: Tavoitteena on saada vahvistusvaste vastaamaan suurimman vahvistuksen vastetta, esim. IEC 60118-0+A1:1994, mutta ilman feedbackin vaikutusta.
- ** Paristovirta mitataan IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 ja ANSI S3.22:2014 §6.13 mukaisesti, kun asettumisaika on vähintään 3 minuuttia.
- *** Perustuu standardoituun paristonkulutuksen mittaukseen (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). Todellinen paristonkesto riippuu pariston laadusta, käytettävästä, kojeen toimintaominaisuuksista, kuulonalenemasta ja ääninympäristöstä.

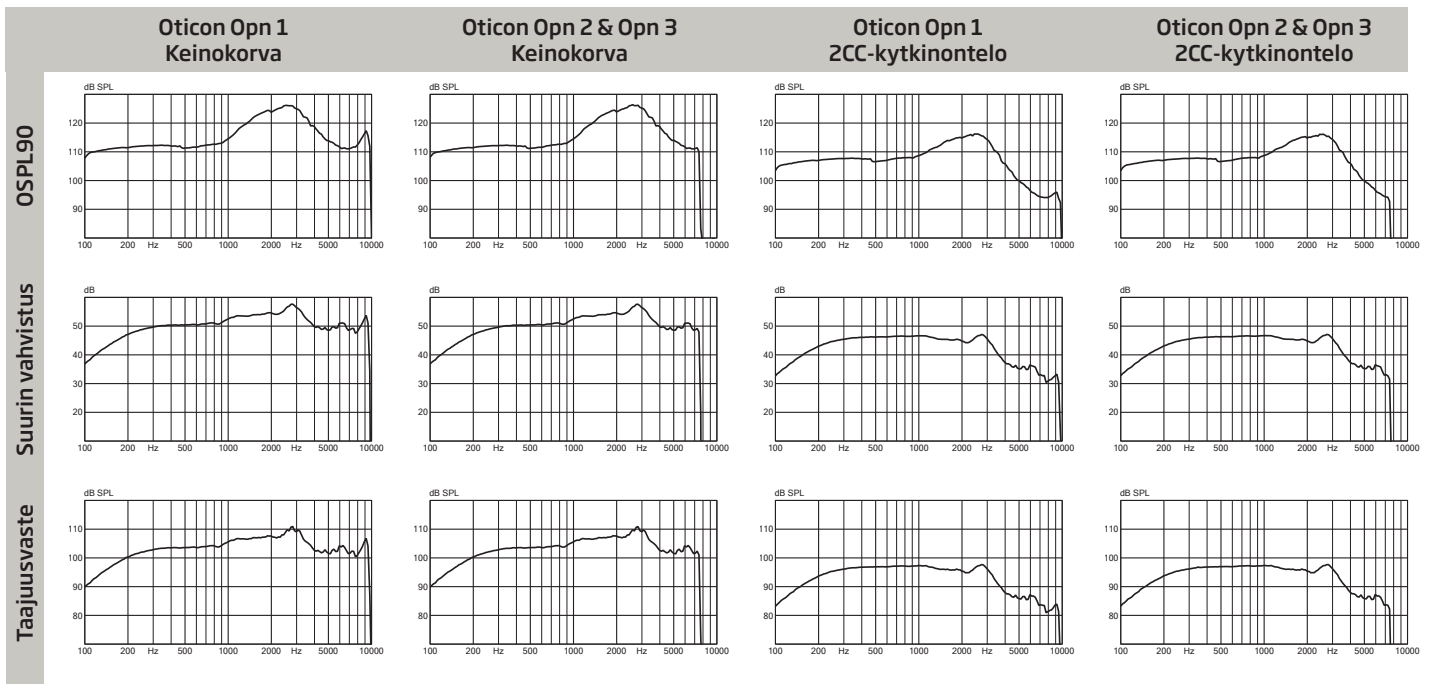

Tekniset tiedot: Omni-suuntatoimintoa käytetty, ellei muuta ole mainittu.

Käyttöolosuhteet
Lämpötila: +1°C - 40°C

Suhteellinen kosteus:
5-93 %, ei-tiivistyvä

Säilytys- ja kuljetusolosuhteet

Lämpötila ja kosteus eivät saa ylittää annettuja arvoja pitkiä aikoja kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

Lämpötila: -25°C - +60°C
Suhteellinen kosteus: 5-93 %, ei-tiivistyvä